


EYECTORES TRANSPARENTES, PUNTA REMOVIBLE

Eyector punta azul

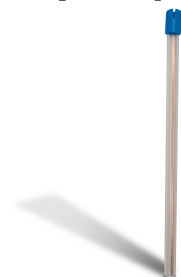

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Eyectores transparentes, punta removible
Marca:	Arosa
Material:	Cánula y boquillas de PVC. Alambre guía de echapado en acero.
Color:	Transparente.
Tallas:	Única.
Presentación:	Bolsa x 100 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Los eyectores de saliva son dispositivos médicos desechables que succionan el exceso de saliva y/o sangre presente en la boca durante los procedimientos dentales, permitiendo un campo visual más limpio para el profesional. El dispositivo se ajusta a presión en un inserto conectado al circuito de succión del sistema hidráulico o neumático utilizado por el dentista.		
Libre de látex:	Sí.	Estéril:	No
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso:	Insumo descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El material PVC se considera un material con buena resistencia física y química compatible con la sangre y un alto nivel de impermeabilidad al vapor de agua.
- El eyector posee tres partes: boquilla plástica de PVC a través de la cual se conecta al circuito de succión, el cuerpo flexible de PVC traslúcido que conduce la saliva hasta un depósito y alambre enchapado en acero muy flexible que permite adaptar el eyector a la boca del paciente. El eyector tiene en su interior un alambre recubierto sin memoria, lo que permite adaptar su forma según la necesidad del profesional.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Diámetro cánula	Largo cánula	Peso cánula	Peso bolsa
AAESA15T	3,9 mm	15 cm	4,1 gr	404 gr

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001.
- ISO 13485-2016
- Producto Libre de DEHP.