


## FICHA TÉCNICA

### PAQUETE QUIRÚRGICO GENERAL DE TRES BATAS



#### Aplicación

El paquete universal de cirugía está especialmente diseñado para varios tipos generales de procedimientos quirúrgicos en el quirófano. Se envasan estériles para ahorrar tiempo y reducir los costos de preparación del quirófano. Las enfermeras y los médicos también revisan su precisión clínica. Cada paquete es estéril y desechable. Contiene dos batas quirúrgicas reforzadas, una bata quirúrgica sin refuerzo, toallas de mano, cubierta de la mesa quirúrgica, campos utilitarios, cubierta de mesa mayo, sábanas universales y bolsa para suturas.


#### Imagen del producto

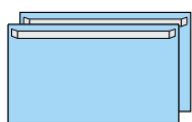


**Campo utilitario**

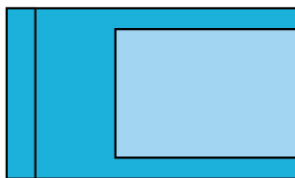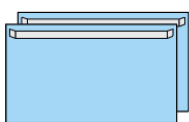


**Cobertor mesa mayo**

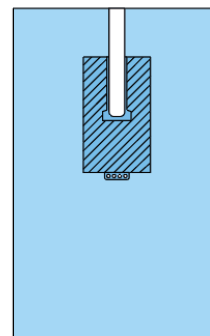

**Sábana universal en "U"**

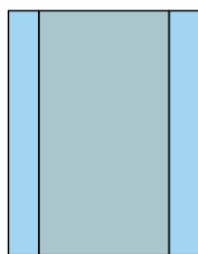

**Cobertor de  
mesa quirúrgica**

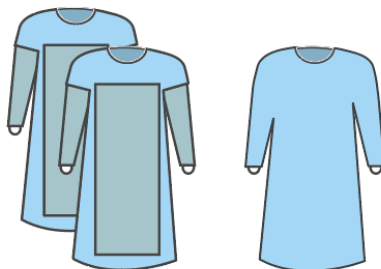


**Bata quirúrgica reforzada**



**Toalla de mano**



**Bolsa de suturas**

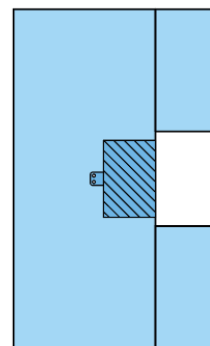

**Sábana auxiliar universal**



## Accesorios Principales

| No. | Componente Descripción       | Tamaño                                  | Cantidad |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 1   | Batas Quirúrgica Reforzada   | 125*155 cm largo                        | 2 piezas |
| 2   | Bata Quirúrgica              | 125*155 cm largo                        | 1 pieza  |
| 3   | Bolsa de sutura              | Papel                                   | 1 pieza  |
| 4   | Toallas de mano              | 36 x 57                                 | 3 piezas |
| 5   | Campos utilitarios con cinta | 70 x 40 (cinta adhesiva de 5 cm)        | 4 piezas |
| 6   | Cobertor de mesa mayo        | Reforzado, 60 x 137 cm                  | 1 pieza  |
| 7   | Cobertor de mesa quirúrgica  | Reforzado, 150 x 230 cm                 | 1 pieza  |
| 8   | Sábana universal en U        | Reforzado, 190 x 300 cm (cinta de 5 cm) | 1 pieza  |
| 9   | Sábana auxiliar universal    | Reforzado, 270x160cm (cinta de 5 cm)    | 1 pieza  |

## Características del paquete quirúrgico de tres batas

- Material: SMS (Spunbond + Meltblown + Spunbond) Spunbond tiene una mejor resistencia y tensión; Meltblown tiene una mejor resistencia al material no tejido bacteriano.
- Tela no tejida hidrofílica + película PE: Resistencia a la sangre, capacidad de resistencia al agua, resistencia al aceite y al alcohol.
- El producto se caracteriza por adecuarse a varios tipos de cirugía en las cuales se requieren el uso de batas, paños, toallas, campos y cobertores que se contienen en un solo paquete para reducir el tiempo de preparación de las instituciones médicas.
- Uso único: El producto es desechable, no se puede reutilizar. Todos los materiales se pueden recolectar y desechar después de la cirugía, lo que puede evitar la infección cruzada de manera efectiva.
- Comodidad: Todo el material está diseñado y fabricado con el máximo objetivo de protección, seguridad y comodidad tanto para pacientes como para cirujanos, especialmente en la cirugía de larga duración. Tienen la característica de poder usarse en procedimientos donde exista contacto con alcohol, sangre, aceite, entre otros, debido a su repelencia al agua y tratamiento antiestático, lo que asegura en gran medida que no habrá daño durante la cirugía.
- Seguridad: Los materiales no tejidos son cuidadosamente estudiados y elegidos para crear las mejores barreras para bacterias, sangre y otros fluidos. El polipropileno Spunbond tiene una alta resistencia a la abrasión, retardante de fuego, anticorrosión, mientras que el soplado en fusión tiene una alta propiedad de filtración y barrera. El SMS combina las ventajas de ambas telas no tejidas. Lo más importante es minimizar la infección cruzada durante la cirugía.
- Los campos quirúrgicos están equipados con cinta de doble cara para fijar en la incisión y evitar el cambio de posición.
- Color: Azul
- Esterilizado con Óxido de Etileno y no reutilizable.
- Vida útil: 5 años



## Información de embalaje

|                          |                         |                                 |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Paquete universal</b> | <b>1 paquete/ bolsa</b> | <b>10 paquetes/ caja máster</b> |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|

## Almacenamiento

- Almacenamiento en ambiente seco, ventilado, mantener limpio, evitar el sol y la lluvia.
- Evitar fuentes de ignición y materiales inflamables.

## Instrucciones

1. Antes de abrir el paquete, verifique que no esté dañado o si el paquete esta vencido; en caso afirmativo, deséchelo.
2. Cuando abra el paquete, tenga cuidado que sus manos no toquen ningún componente dentro del paquete.
3. Saque el paquete de la mesa de instrumentos y luego rasgue la etiqueta con cuidado de acuerdo con las instrucciones.
4. Cuando abra la cubierta de la mesa quirúrgica, tenga cuidado que el lado izquierdo y el derecho se extiendan primero, luego la parte inferior y por último la parte superior, así se asegura que la cubierta de la mesa esté plana en la mesa quirúrgica. Tenga cuidado que la cubierta de la mesa caiga entre 30 y 40 cm a cada lado.
5. Cuando abra la cubierta para la mesa mayo, tenga cuidado de seguir las instrucciones en la etiqueta y coloque las manos en la cubierta de la mesa mayo y luego en la bandeja de instrumentos, hasta que se fortalezca la parte sobre la bandeja. La cubierta mantiene la bandeja de instrumentos estéril y después de la cirugía, también puede utilizarse como bolsa de basura.
6. La toalla de mano sirve para que los médicos y el personal se sequen las manos al entrar al quirófano.
7. Coloque la sábana inferior debajo del paciente, las sábanas laterales grandes en el lado izquierdo y derecho; estas constituyen el primer sistema de barrera estéril. Luego se utilizan las pequeñas cortinas laterales adhesivas para colocar alrededor del paciente, que constituyen el segundo sistema de barrera estéril.



## Descripción de componentes

### Bata quirúrgica reforzada

2 Unidades de batas quirúrgicas reforzadas de 125 x 155 cm, de material SMS (tres capas) de 40g/mt<sup>2</sup>, con tratamiento antiestático, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos con densidad menor al alcohol o sangre, con resistencia a la tensión y al desgarre, minimizante de chispa y no inflamable. Empaque individual y estéril. Certificación AAMI PB70 NIVEL3 y EN13795.

### Bata quirúrgica

1 Unidad de bata quirúrgica de 125 x 155 cm, de material SMS (tres capas) de 40g/mt<sup>2</sup>, con tratamiento antiestático, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos con densidad menor al alcohol o sangre, con resistencia a la tensión y al desgarre, minimizante de chispa y no inflamable. Empaque individual y estéril. Certificación AAMI PB70 NIVEL2 y EN13795.

### Bolsa de suturas

1 Unidad de bolsa de papel de 16 x 30 cm, estéril.

### Toalla de manos

3 Unidades de toallas de mano de 31 x 51 cm de celulosa de papel de 65g/mt<sup>2</sup>, estéril.

### Campos Utilitarios

4 Unidades de campos utilitarios de 40 x 70 cm de material SMS (tres capas) de 45g/mt<sup>2</sup> con cinta adhesiva de 5 cm, estéril.

### Cobertor de mesa mayo

1 Unidad de cobertor de 60 x 137 cm de tela 55g g/mt<sup>2</sup> PE + 40g/mt<sup>2</sup> SMS, estéril.

### Cobertor de mesa quirúrgica

1 Unidad de sábana tipo cobertor de mesa quirúrgica de 150 x 230 cm. de material 27g/mt<sup>2</sup> PE + 30g/mt<sup>2</sup> PP con tratamiento antiestático, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos con densidad menor al alcohol o sangre, con resistencia a la tensión y al desgarre, minimizante de chispa y no inflamable, estéril.

### Sábana universal U

1 Unidad de campo tipo U de 190 x 300 cm de material SMS (tres capas) de 45 g/mt<sup>2</sup> con hendidura en "U" de 30 x 80 cm, con tratamiento antiestático, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos con densidad menor al alcohol o sangre, con resistencia a la tensión y al desgarre, minimizante de chispa y no inflamable. Cuenta con 4 porta tubos reforzados y con cinta adhesiva de 5 cm. de ancho, estéril.

### Sábana auxiliar universal

1 Unidad de campo tipo U de 270 x 160 cm de material SMS (tres capas) de 45 g/mt<sup>2</sup>, con hendidura en "U" de 50 x 80 cm tratamiento antiestático, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos con densidad menor al alcohol o sangre, con resistencia a la tensión y al desgarre, minimizante de chispa y no inflamable. Cuenta con 2 porta tubos reforzados y con cinta adhesiva de 5 cm. de ancho, estéril.

### Empaque

Bolsa de papel y plástico para esterilizar, con frente visible y marcador de esterilidad.  
Empaque secundario individual de los componentes del paquete.

